



#### [PRODUCATOR]

- lavoare aseptice din inox pentru spalare chirurgicala
- sisteme si echipamente pentru filtrarea, tratarea și sterilizarea apei
- mobilier medical din inox



## MEDISAR 3 HOSPITAP

capsula finala microfiltrare productie apa sterila pentru aplicatii medicale • 0,2μ

## CERTIFICAT DE GARANTIE MEDISAR 3 HOSPITAP



### TERMEN DE GARANTIE:

1. **4-6 luni** din momentul primei utilizari, la un numar de maxim 3 de autoclavari (conform proceduri de manipulare, utilizare și sterilizare - Declaratie de Conformitate, Pliant Tehnic)
2. **36 luni** neutilizata, de la data primei sterilizari.



#### Important!

**Aceasta capsula filtranta se autoclaveaza la un interval de 2-3 luni (la 134 °C, 30 min)!**

Dupa 4-6 luni se inlocuieste cu o alta noua! Este **obligatorie** prefiltrarea apei cu un sistem profesional de filtrare mecanica in trepte, iar in cazul in care presiunea apei este mai mare de 4 bar - montarea pe rețeaua de apa a unui regulator profesional de presiune.



Diamterul porilor » 0,45μ + 0,2 μ  
Tip membrana » polyethersulfone  
Aria de filtrare » 0,015 m<sup>2</sup>  
Temp. maxima lucru » 60 °C @ 4 bar  
Diametru » 46 mm




#### ATENTIE!

» Se recomanda **testarea apei** inaintea montarii Capsulei finale microfiltrare pentru sisteme de spalare **MEDISAR 3 HOSPITAP!**



# MEDISAR 3 HOSPITAP

capsula finala microfiltrare producere apa sterila pentru aplicatii medicale ▪ 0,2μ

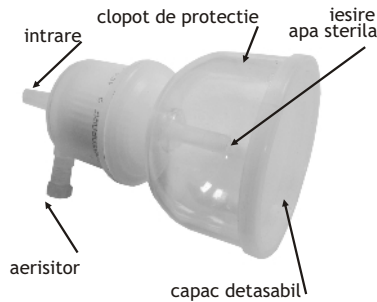

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Aceste capsule se instaleaza direct la punctul de utilizare, asigurand astfel retinerea microbilor in timpul procedurilor de utilizare apa sterila pentru aplicatii clinice sau de clatire a echipamentului si instrumentarului medical.
- Fiecare capsula **MEDISAR 3** - asigura un filtrat steril cand este supusa la o incarcatura de  $10^7$  *brevundimonas diminuta* pe  $cm^2$ , in concordanta cu reglementarile farmaceutice HIMA/ASTM.
- Capsula **MEDISAR 3** - asigura siguranta biologica prin alinierea si respectarea standardelor USP Plastics Class VI si reglementarilor FDA.
- Capsula **MEDISAR 3** - poate fi instalata imediat si extrem de simplu pe un suport special (prindere prin cupla rapida) sau pe un pistol de spalare instrumentar medical.
- Fiecare element este testat din punct de vedere al integritatii prin ambele metode de difuzie si *bubble point* pentru a sigura ca aceasta capsula indeplineste toate criteriile unui filtru sterilizant si criteriile de asigurarea calitatii impuse pentru acest tip de filtru.

## INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE

Aceasta capsula de filtrare finala pentru producerea de apa sterila este prevazuta cu un clopot de protectie si un capac detasabil din plastic. Pentru folosirea in siguranta deplina a acestui filtru special la **procedurile de spalare / clatire** a instrumentarului, se indeparteaza **doar** capacul din plastic, clopotul de protectie ramanand atasat de capsula. In cazul in care aceasta capsula speciala este folosita pentru **proceduri chirurgicale (urologie, s.a.)**, se repeta operatiunea mai sus amintita (indepartarea capacului din plastic mat) si se conecteaza furtunul din silicon autoclavabil, **deschizandu-se obligatoriu valva de aerisire de pe capsula**. Inainte si dupa fiecare utilizare a acestei capsule se va face o dezinfectie preventiva a suprafetei interioare a clopotului de protectie, pulverizand din abundenta un dezinfectant de suprafete. De asemenea, in timpul utilizarii capsulei, este obligatorie protejarea capacului detasabil prin depozitarea temporara a acestuia pe un **camp steril**, intr-o caserola din inox. **IMPORTANT! A nu se atinge stutul de iesire apa sterila!**



INTERVENTII in PERIOADA DE GARANTIE si POSTGARANTIE » Schimb de capsule filtrante / Mentenanta / Dezinfectie locala

| Perioada | Capsula filtranta MEDISAR 3 | Dezinfectie |
|----------|-----------------------------|-------------|
| zinic    |                             | ✓           |
| 4-6 luni | ✓                           |             |



## IQ WATER MEDICAL

- Lavoare aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor / Gama **MEDIASEPT** - IQ WATER
  - Baterii medicale cu actionare manuala (cu cotul) si cu senzor / Gama **PROCLINIC**
- Sisteme de filtrare submicronica pentru producerea apei sterile / Capsule filtrante 0,2μ / Gama **MEDISAR**
  - Dispensere sapun / solutie dezinfectanta cu actionare manuala sau prin senzor / Gama **MEDICARE**
- Sisteme pentru producere apa sterila - spalare instrumentar medical si aplicatii medicale / Gama **MEDISAFE**
  - Sisteme de prefiltrare mecanica (grosiera) a apei / Gama **CRYSTAL**
  - Echipamente de filtrare si decontaminare a apei / Gama **DIAMOND**
- Consumabile si accesorii pentru lavoarele aseptice, sistemele de filtrare, tratare si microfiltrare
  - Service, intretinere, mentenanta si interventie rapida

Solutii Personalizate - Consultanta de Specialitate - Montaj si Punere in Functiune - Service in Garantie si Post-Garantie